

Gymna Thermo 500

Gepulseerde korte golf therapie



gymna[®]

gymna.com

Gymna Thermo 500

Therapeutische warmte die tot diep in de weefsels doordringt

Hoe werkt het?

Korte golf diathermie is een medische toepassing van elektromagnetische energie. De golven penetreren tot diep in het lichaam en kunnen thermische en a-thermische effecten hebben. Het thermische effect is een opwarming die de doorbloeding sterk verbetert. De a-thermische werking heeft cellulaire effecten. Beiden dragen ze bij tot krachtige fysiologische effecten die de techniek inzetbaar maakt bij een breed palet van aandoeningen.



Indicaties

- Chronisch musculoskeletaal
- Acuut weke delen
- Circulatoire aandoeningen



Gymna Thermo 500

Thermische en a-thermische korte golf

Efficiënte werking

3 krachtige elementen

Thermoploden




De speciale inductie elektroden garanderen een optimale penetratie in musculoskeletale weefsels, energie gaat niet verloren in vetweefsel. Het toestel wordt standaard geleverd met een 14 cm Thermoplode. Een 8 cm Thermoplode is in optie verkrijgbaar, deze is beter geschikt voor kleine lichaamsdelen (enkel, pols, knie, ...).

Feedbacksysteem

De Thermo 500 is uitgerust met een automatisch feedback systeem. De behandeling wordt onderbroken van zodra de patiënt niet meer in de correcte houding tov de thermoplode ligt; de behandeltime stopt, het toestel geeft dit met een visueel en een audio signaal aan.

Free memory

In het toestel zijn reeds 38 indicaties geprogrammeerd, oa decubitus, chondromalacie, lumbalgie en myalgie, alleen het vermogen moet nog ingesteld worden. In het geheugen zijn 50 vrije plaatsen voorzien voor individuele programma's.

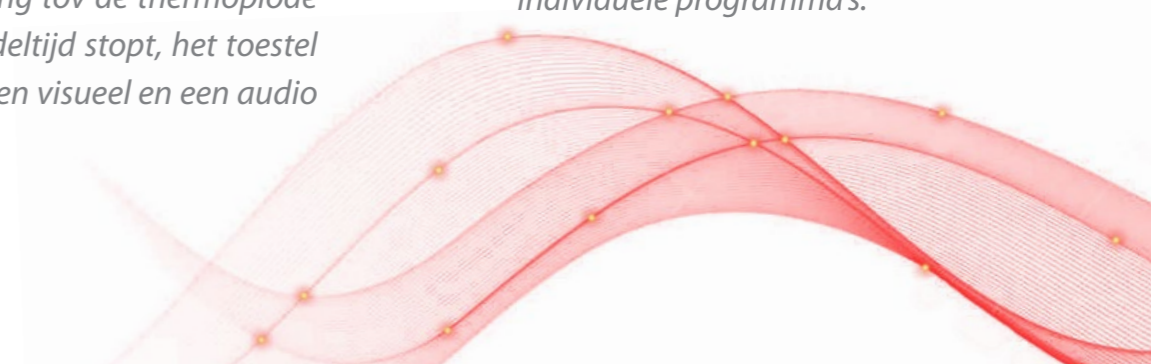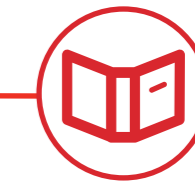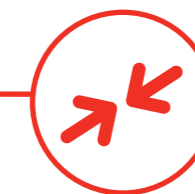


**GYMNA
THERMO 500**
Gepulseerde korte
golf therapie



Cryotherapie **Diathermie** **Shockwave Therapie** **Physio Care** **Behandelbanken** **Elektrotherapie** **Active Motion**



Uw verdeler:



gymna.com **gymna**[®]

GymnaUniphy NV Pasweg 6A | B-3740 Bilzen, Belgium
Tel: +32 (0)89 510 510 | Fax: +32 (0)89 510 511